


## 女性に配慮したAEDの使い方

パッドを

**素肌に直接貼り付ける**  
ことができている場合は、ブラジャーを外す必要はありません。  
服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたり**に貼ることで対応できます。

**金属製品**（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）はパッドに**触れさせない**ようにしてください。  
パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

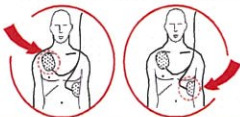

パッドを貼った後に  
上から上着やタオルなどを  
かけて大丈夫です。

### その他の注意事項

- \* 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- \* 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- \* ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- \* 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【出典】東京都多摩府中保健所

【監修】公益財団法人日本AED財団

【問合せ先】

置賜広域行政事務組合消防本部

救急救助課

電話：0238-23-3017

**重要なことは  
電気ショックの時間を  
遅らせないことです**

電気ショックが1分遅れると  
社会復帰率が7～10%低下します

**勇気を持って 命を助けるために  
一歩踏み出してください**